

Een van **de meest verkochte** AED's ter wereld

Philips HeartStart HS1 AED

De Philips HeartStart HS1 AED van Philips is een kleine, lichte, betrouwbare en gemakkelijk te gebruiken automatische externe defibrillator (AED). De AED is zo ontworpen dat praktisch iedereen hiermee een leven kan redden. Het is een van de meest verkochte AED's ter wereld.

Gebruiksvriendelijk

- De Philips HS1 wordt alom geprezen om haar **bedieningsgemak**.
- Duidelijke en **uitgebreide begeleiding** bij een reanimatie.
- Tijdens de reanimatie procedure wordt de hulpverlener stap voor stap geïnstrueerd door middel van duidelijke, **Nederlands gesproken** aanwijzingen.
- De Philips HeartStart HS1 **registreert wat de hulpverlener doet** en geeft aan de hand daarvan een volgende instructie, pas als de vorige is uitgevoerd.

Veilig

- Is gebaseerd op **uiterst geavanceerde technologie**.
- Stelt via een **zeer nauwkeurig algoritme** vast of er sprake is van een hartstilstand.
- Zal in **geen geval een schok afgeven** als er geen sprake is van een hartstilstand.

Betrouwbaar

Om een goede werking te garanderen is de Philips HeartStart HS1 voorzien van een uitgebreid zelftest-systeem, dat snel reageert als er een storing dreigt. In geval van een storing zal de Philips HeartStart HS1 zowel een auditief- als een visueel-alarm geven bij het mislukken van de zelftest.

Dit zelftest-systeem voert dagelijks, wekelijks en maandelijks een testprocedure uit. Dit gebeurt volledig automatisch. De elektroden worden getest op aanwezigheid en functionaliteit. Statuscontrole in één opslag.


Status indicator

Een groen ledje dat laat zien of de HeartStart defibrillator klaar is voor gebruik. Een knipperend groen status-indicator-lampje betekent dat de defibrillator klaar is voor gebruik; een constant brandend status-indicator-lampje betekent dat de defibrillator gebruikt wordt.

Indien de statusindicatorlampje niet brandt is uw aandacht vereist (De Philips HeartStart 'kwettert' en i-knop knippert).

Bedienings-knoppen

- **Aan/uitknop**
Druk op deze groene knop om de HeartStart aan te zetten. Om de HeartStart uit te zetten, drukt u nogmaals op de groene knop en houdt u hem één (1) seconde ingedrukt.

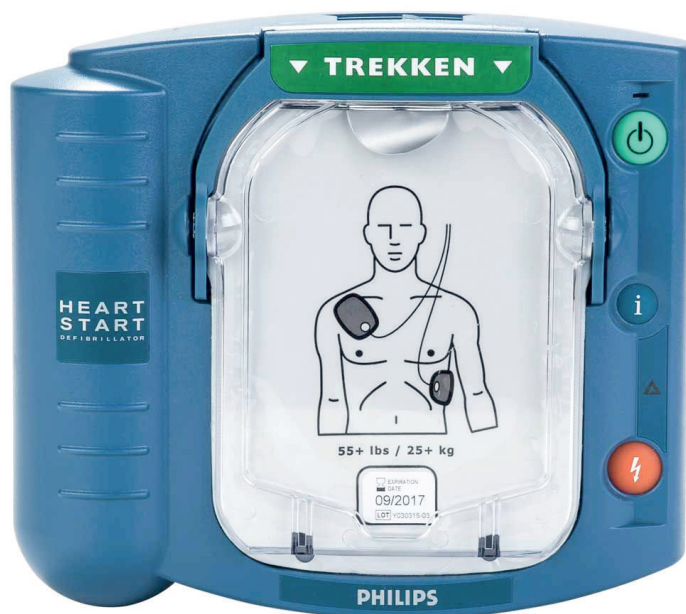

Philips HeartStart HS1

- **Informatieknop**
Deze blauwe 'i-knop' knippert als er informatie is, die u kunt zien door op deze knop te drukken. Tevens knippert de knop aan het begin van een pauze voor verzorging van de patiënt als begeleiding voor basisreanimatie geactiveerd is.
- **Schoktoets**
Druk op deze knipperende oranje knop als de HeartStart u vraagt om een schok af te geven.
- **Waarschuwinglampje**
Dit driehoekige lampje knippert tijdens ritmeanalyse en brandt constant als er een schok is aanbevolen, om u eraan te herinneren dat u de patiënt niet mag aanraken.